


GC INITIAL MC gum shade set

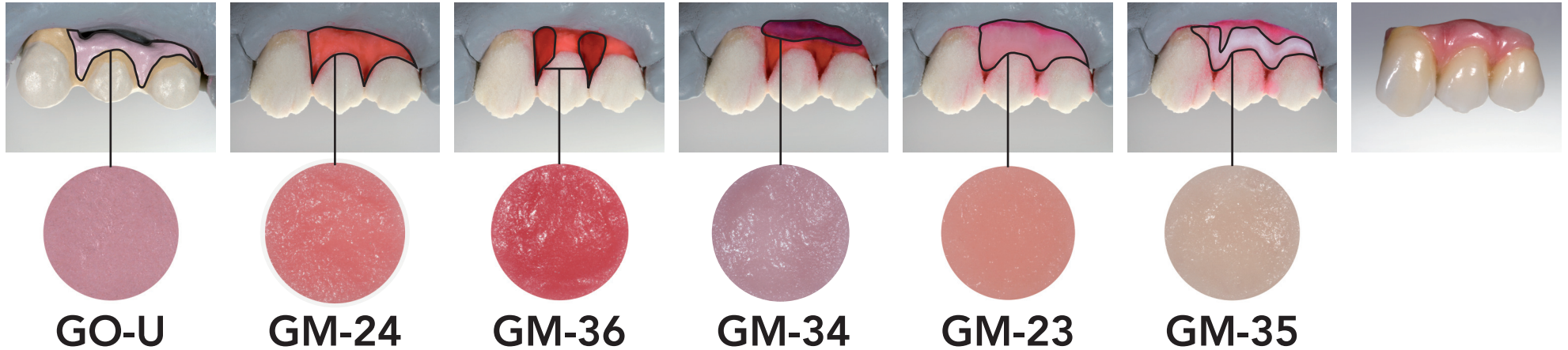

TECHNICAL INSTRUCTIONS - Additional set for individual gum shading

Gum Opaque

This is applied and fired together with the tooth-coloured opaque after the wash bake.

Base Dark

These base gum masses are applied after layering the "tooth-coloured" ceramics. The basic mass GM-24 is applied as the bottom, first layer.

Intensive Red

This powder intensifies the areas between the tooth roots. The area of application is rather selective.

Intensive Violet

GM-34 is suitable for extended restorations in the mucogingival fold. It can also be used with dark skin types.

Base Light

The entire gum layering is covered with GM-23. It is a basic powder and essentially regulates the final colour.

Intensive Cream

Then lighter areas of the attached gingiva are reconstructed on the surface. GM-35 can also be applied separately as a correction firing.

The individual steps can be divided between different firings. Firing schedule analogue to the standard layering technique (see Technical Manual for GC Initial MC).

TECHNISCHE ARBEITSANLEITUNG - Zusatzset zur individuellen Gingivagestaltung

Gum Opaque

Dieser wird nach dem Washbrand zusammen mit dem Zahnfarbenen Opaker aufgetragen und gebrannt.

Base Dark

Das Auftragen der Gingivamassen beginnt nach dem Auftragen der „zahnfarbenen“ Massen. Die Basismasse GM-24, wird als unterste, erste Schicht aufgetragen.

Intensive Red

Mit dieser Masse werden die Bereiche zwischen den Zahnwurzeln intensiviert. Der Einsatzbereich ist eher punktuell.

Intensive Violet

Für ausgedehnte Restorationen in der Umschlagsfalte eignet sich die GM-34. Sie kann auch bei dunklen Hauttypen verwendet werden.

Base Light


Die gesamte Gingiva-Schichtung wird mit GM-23 überschichtet. Sie ist eine Basismasse und steuert maßgeblich die Farbgebung.

Intensive Cream

Abschließend werden auf der Oberfläche helle Bereiche der attached Gingiva rekonstruiert. GM-35 kann auch mit dem Korrekturbrand separat aufgetragen werden.

Die einzelnen Schritte können auf verschiedene Brände aufgeteilt werden. Brandführung analog zur Verblendtechnik (siehe technische Arbeitsanleitung GC Initial MC).

GC INITIAL MC gum shade set

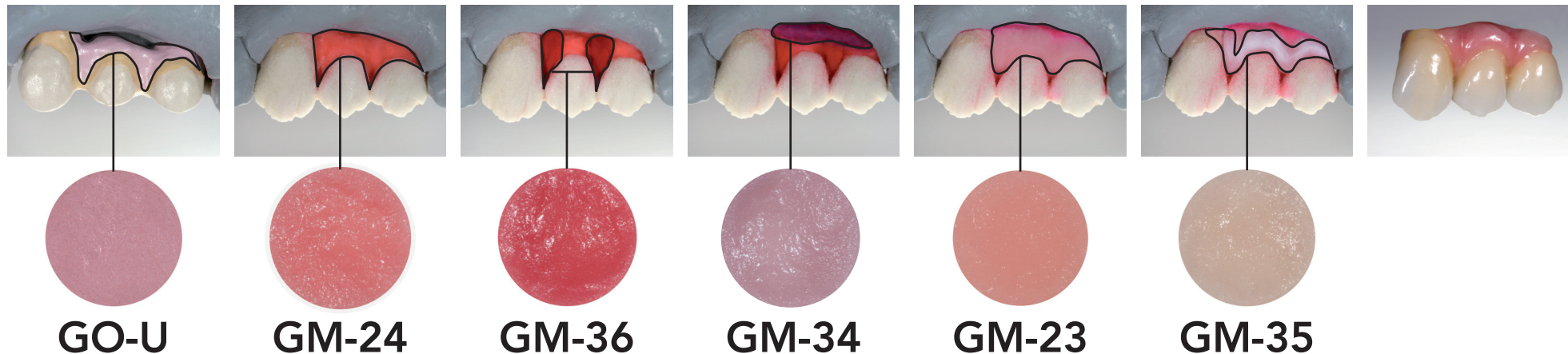

GO-U

GM-24

GM-36

GM-34

GM-23

GM-35

INSTRUCTIONS TECHNIQUE - Coffret additionnel pour caractérisation individuelle de la gencive

Gum Opaque

Appliquer et cuire GO-U en même temps que la deuxième cuisson d'opaque de la teinte.

Base Dark

Cette masse de base est appliquée en première couche comme support afin de créer un effet de profondeur.

Intensive Red

Cette masse intensifie les zones situées au niveau radulaire des dents ce qui en fait une zone d'application sélective.

Intensive Violet

GM-34 peut être utilisée pour les restaurations s'étendant au pli mucco-gingival. Il peut être également utilisé avec les types de peau noires.

Base Light

La gencive est entièrement recouverte de GM-23. C'est une masse basique essentielle pour stabiliser la couleur finale.

Intensive Cream

Les zones plus lumineuses de la gencive sont reconstituées en surface. GM-35 peut également être appliqué séparément comme masse de retouche.

Les étapes individuelles peuvent être divisées en différentes cuissons. Guide de cuisson identique à la technique de montage par couche (voir Manuel technique de GC Initial MC).

ISTRUZIONI TECNICHE - Set aggiuntivo per individualizzare la colorazione gengivale

Gum Opaque

Viene applicato e cotto con gli opachi del colore dei denti dopo la fase di "wash bake".

Base Dark

Questa massa gengivale di base si applica dopo la massa del colore dei denti. La massa base GM-24 viene applicata come primo strato di fondo.

Intensive Red

Questa massa intensifica le aree tra le radici dei denti. L'ambito di applicazione è piuttosto ristretto.

Intensive Violet

GM-34 è adatto ai restauri estesi nella piega mucogengivale. Può anche essere utilizzato con tipi di pelle scura.

Base Light

Tutto lo strato gengivale viene coperto con GM-23. Si tratta di una massa di base che sostanzialmente regola il colore finale.

Intensive Cream

GM-35 serve per la ricostruzione delle aree chiare sulla superficie in corrispondenza dell'attacco gengivale. GM-35 può anche essere applicato separatamente con la cottura di correzione.

I singoli passaggi possono essere divisi tra diverse cotture. Cottura dell'analogo guida secondo la tecnica di stratificazione standard (si veda il manuale tecnico per GC Initial MC).